
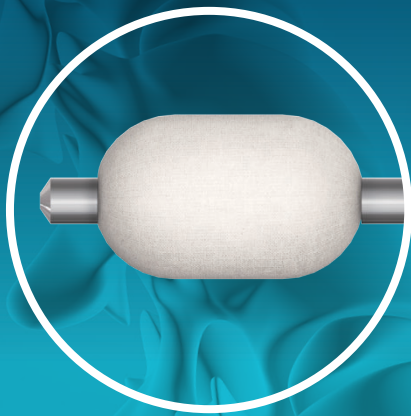


# OVERFIX<sup>®</sup>

SPINE

## Cifoplastía PKP

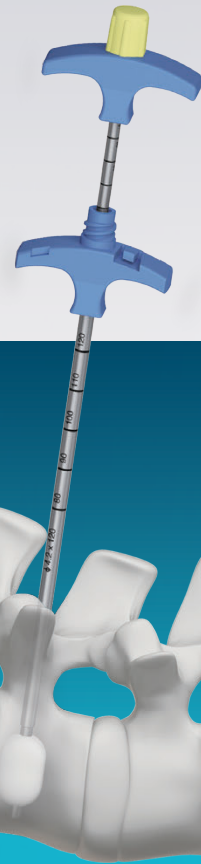

# bioadvance



# OVERFIX Cifoplastía PKP

## Características

- Cifoplastia mínimamente invasiva.
- Corrige la altura vertebral.
- Contenedor de cemento óseo elipsoidal: encaja en la cavidad vertebral y previene filtraciones de cemento.



## CIFOPLASTIA CONVENCIONAL POR INYECCIÓN DIRECTA DE CEMENTO ÓSEO



Acceso óseo




Se infla el balón con fluido



El cemento óseo se inyecta directamente

## NUEVA CIFOPLASTIA POR INYECCIÓN A TRAVÉS DE CONTENEDOR DE CEMENTO ÓSEO

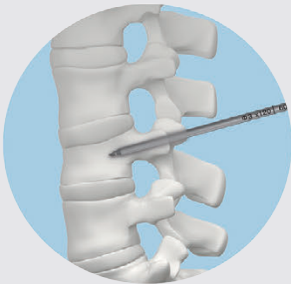

Acceso óseo



Se inyecta el recipiente de cemento óseo  
(el globo o el dilatador pueden usarse primero  
para restaurar la altura vertebral)



El cemento óseo se inyecta a través  
del contenedor de cemento óseo











## Indicaciones


- VCF reciente sin lesiones en el nervio
- VCF mayor a 6 meses, con cifosis severa y dolor de espalda correlativo
- VCF múltiple en segundo lugar a VCF simple por osteoporosis
- VCF patológicos, como tumores benignos o malignos

## Contraindicaciones

- Fractura por estallido vertebral con lesión nerviosa
- No se puede tolerar la operación por insuficiencia cardíaca grave, hepatitis o insuficiencia renal
- VCF con dislocación articular facetaria
- Osteomielitis o infección del sistema
- Hiperlipemia con registro de embolización vascular
- Mujeres embarazadas
- Alergia a cemento óseo o instrumentales

# OVERFIX Cifoplastía PKP

Instrumental	CÓDIGO	MEDIDAS		IMAGEN
BALÓN	71711512	15	120	
CONTENEDOR DE CEMENTO ÓSEO	71722012	20	120	
TROCAR	71750203	B	3.0*120	
ALAMBRE GUÍA	71750300	-	-	
PASADOR GUÍA	71750400	-	-	
EXPANSOR	71750503	-	4.2*120	
BROCA	71750605	-	3.5*120	
EXPANSOR DE TROCAR	71750805	B	4.2*120	
BIOPSIA	71750905	-	3.4*120	
DISTRACTOR	71751100	-	-	
SISTEMA DE CARGA DE CEMENTO ÓSEO	71751405	A	3.4*120	
BARRA DE EMPUJE	71751901	-	120	
INYECTOR DE CEMENTO ÓSEO	71752505	5ml	-	
BOMBA	71751300	-	-	
CEMENTO ÓSEO	71700000	20g	-	

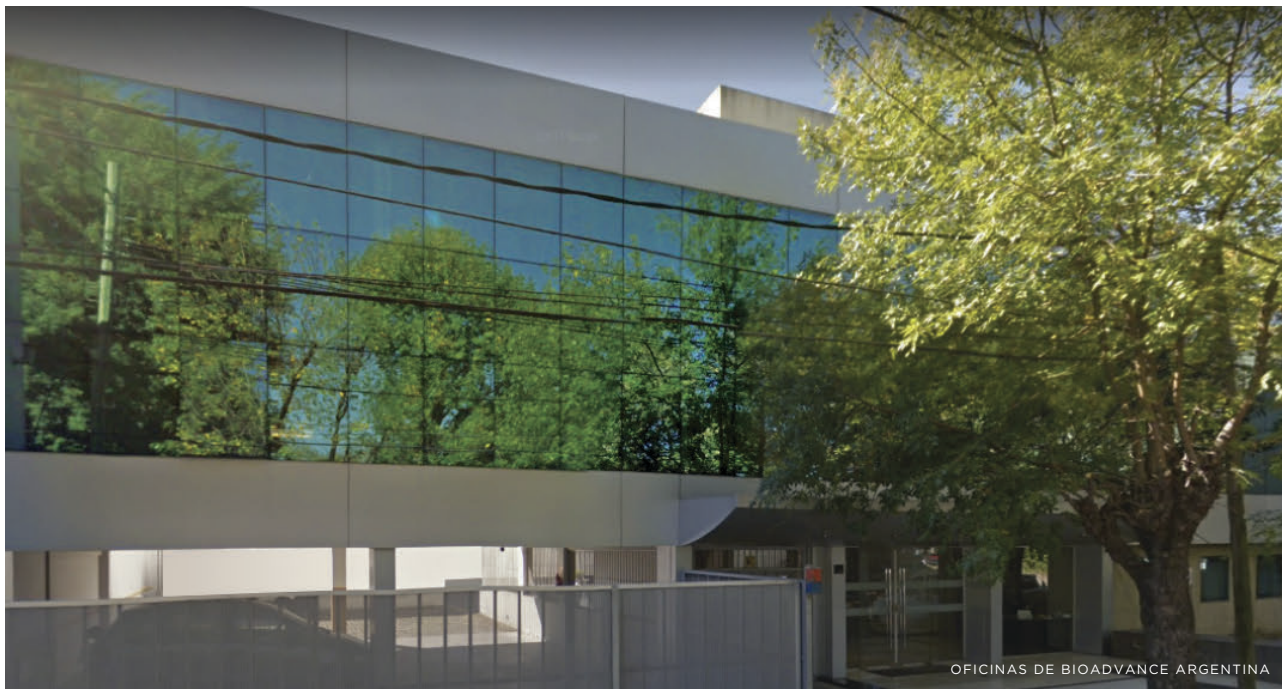

## BIOADVANCE

Con más de 11 años dedicados al servicio de la salud, ofrecemos las gamas más completas de prótesis, implantes e instrumentales para traumatología, neurocirugía y artroscopía. Nos destacamos por nuestro servicio, dispositivos de calidad y costos competitivos a nivel global.

Nuestros productos cumplen con los más altos estándares internacionales de acuerdo a las certificaciones y registros sanitarios vigentes. Implementamos procedimientos de trazabilidad y tecnovigilancia en las diferentes etapas de almacenamiento y comercialización de nuestros dispositivos. Esta rigurosidad en el control nos permite sostener un alto valor de marca, garantizando la mayor seguridad a los pacientes.

Desde nuestra sede operativa en Estados Unidos, y filiales en México, Chile y Argentina, prestamos soluciones médicas a toda Latinoamérica. Para conocer nuestras líneas de productos, por favor póngase en contacto para vincularlo con el distribuidor más cercano a su ubicación.



**OVERFIX<sup>®</sup>**  
— SPINE —

**bioadvance**  
— DISPOSITIVOS MÉDICOS —

CDMX  
Heriberto Frias 1104-302  
Colonia del Valle Centro  
Benito Juárez  
CP 03100, CDMX

GUADALAJARA  
Av. Prol. A. López Mateos Sur 1710  
PB9 int 20, Colonia Santa Isabel  
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco  
CP. 45645, Guadalajara

CONTACTO  
CDMX: +52 55 5925 5323  
GDL: + 52 1 55 4950 7692  
info@bioadvance.com.mx  
™ f @ bioadvancemed

---

[bioadvance.com.mx](http://bioadvance.com.mx)